

Pluryal

injectables



# YOUR MOST BEAUTIFUL AGE IS NOW!

Pluryal **Booster**

Injectons de la Science à la Beauté

FILLER ESSENTIALS

Pluryal

**Pluryal Booster**  
Hyaluronic dermal injectable  
1 x 1ml



# A PROPOS DE PLURYAL BOOSTER

PLURYAL BOOSTER est un produit injectable fortement concentré en acide hyaluronique, destiné à améliorer l'élasticité de la peau et à maintenir l'hydratation. Il possède une concentration en AH supérieure aux autres produits non réticulés et l'acide hyaluronique possède un poids moléculaire très élevé (> 3 million Daltons), ce qui rend la dégradation plus difficile. Le glycérol présent dans la formule joue un triple rôle : stabilise l'acide hyaluronique (le protégeant contre une dégradation rapide), hydrate et agit comme un antioxydant.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### COMPOSITION

Concentration AH: 1,8% (18mg/ml)  
Agent stabilisateur: Glycérol 2,0% (20mg/ml)  
D'autres ingrédients: Tampon phosphate citrate.

### SPÉCIFICATIONS

Force d'injection : 8N  
Endotoxines: < 0.5 EU/mL  
Stérilisé à la vapeur

### TECHNOLOGIE

P.R.E.M.I.U.M.

### CONTENU

1 x 1ml seringue  
2 x 30 G ½" Aiguilles à paroi très fine (CE 0197)



## MÉTHODE D'ADMINISTRATION

Niveau d'injection: Derme superficiel  
Protocole de traitement recommandé: 3 séances à 2-3 semaines d'intervalles, ensuite tel que nécessaire.

# INDICATIONS

## PATIENTS CONCERNÉS

Le dispositif est une solution viscoélastique permettant de compenser la perte d'acide hyaluronique due au vieillissement, afin de maintenir l'hydratation, d'améliorer la tonicité et l'élasticité de la peau et de combler les ridules telles que les pattes d'oie, les rides du sourire ou les rides du fumeur autour de la bouche.

## RÉGIONS CONCERNÉES

Visage  
Cou  
Décolleté  
Dos des mains

## GROUPE D'ÂGE CONCERNÉ

A partir de l'âge de 25ans


# ÉTUDE CLINIQUE

Dans une étude clinique unicentrique ouverte de type avant-après\*, menée sur 20 volontaires en Iran, le Pluryal Booster s'est révélé sûr et bien toléré, améliorant l'élasticité de la peau et renforçant relativement l'hydratation de la peau.

Vingt femmes et hommes âgés de  $40,15 \pm 6,63$  ans ont reçu 3 injections de Pluryal Booster à 3 semaines d'intervalle. Les paramètres d'hydratation et d'élasticité de la peau ont été évalués avant l'intervention, puis une semaine et 4 mois plus tard. L'amélioration de la peau du visage a également été évaluée à l'aide du score d'évaluation globale du médecin (PGA).

Les résultats ont montré que l'hydratation de la peau ainsi que l'élasticité brute et nette augmentaient, non seulement une semaine après le traitement, mais également au quatrième mois après le traitement. L'effet de fatigue de la peau a également diminué.

### CAS 1

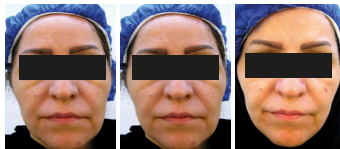

Avant

Une Semaine  
après

4 Mois après

### CAS 2



Avant


Une Semaine  
après

4 Mois après

\*Ayatollahi A, Firooz A, Samadi A. Evaluation of safety and efficacy of booster injections of hyaluronic acid in improving the facial skin quality. Accepted for publication in Journal of Cosmetic Dermatology.

OFFICIELLEMENT DISTRIBUÉ PAR

SINITOX

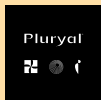

**Pluryal**  
**MD Skin Solutions**  
9AB Boulevard du Prince Henri  
L-1724 Luxembourg  
T: +352 26 20 04 06  
[pluryal.com](http://pluryal.com)